

復刻版ドリル ブローネマルクシステム Mk III & Mk IV用

ブローネマルクシステム旧ドリル* 改良再販のご案内

深さの測定システムを改良

- 黒いコーティングが付与され、目盛りが読み取りやすくなりました。
- 目盛りの位置は、現行販売のツイストドリル、ツイストステップドリルと統一し、実測値となっています。

ツイストドリル

ツイストドリル ϕ 2.8、 ϕ 3.8、 ϕ 4.2mmを追加し中程度の硬さ～緻密な骨質に対応します。



ロングシャフト・バージョン

パイロットドリル、カウンターボア、ドリルキットはロングシャフト・バージョンもお選びいただけます。

パイロットドリル

より大きい径のツイストドリルを使用する前に埋入部位の拡大に使用できます。

* 一部製品の改良再販となります

ブローネマルクシステム Mk III & Mk IV用 ドリル一覧

ガイドドリル

35426

ツイストドリル

NEW

NEW

NEW

長さ	Ø 2.0mm	Ø 2.8mm	Ø 3.0mm	Ø 3.2mm	Ø 3.4mm	Ø 3.8mm	Ø 4.2mm
7-10mm	32296	37328	32266	32269	32272	37331	37333
7-15mm	32297	37329	32267	32270	32273	37332	37334
10-18mm	32299	37330	32268	32271	32274	-	-

NEW

パイロットドリル

	Ø 2.0/2.8mm	Ø 2.0/3.0mm	Ø 3.0/4.2mm
	37335	37336	37337

カウンターボア

ブローネマルクシステム Mk III, Mk IVのインプラント・ショルダ一部に適合した形態に骨を形成します。

	NP	RP	WP
Mk III	NEW 37338	37339	-
Mk IV	32281	32283	32285

ドリルキット

ドリルキットにはガイドドリル、パイロットドリル2.0/3.0mm、チップ付ツイストドリルØ2x7-15mmが含まれます。

長さ	
7-15mm	37343

NEW

ロングシャフト・バージョン


ドリルキットにはガイドドリル、パイロットドリル2.0/3.0mm ロングシャフト、ツイストドリルØ2x7-15mm ロングシャフトが含まれます。

ドリルキット	ツイストドリル	カウンターボア
7-15mm・ロングシャフト	Ø 3.0x7-15mm・ロングシャフト	Mk III RP・ロングシャフト
37342	37340	37341

医療機器届出番号: 13B1X00052000017, 13B1X00052000050

重要

旧ブローネマルクシステム・ドリルでは、目盛りよりカバースクリュー分が約1mm深く形成されるシステムでしたが、ブローネマルクシステム復刻版ドリルは、現行のツイストドリル、ツイストステップドリルと同様の深さの測定システムとなっており、右図の通り、インプラント・プラットフォームの高さまでの実測値となっています。また、ドリルの先端部がインプラントの長さよりも、やや長くなっていますので、骨量に制限がある部位をドリリングする際には、この追加の長さを必ず考慮してください。

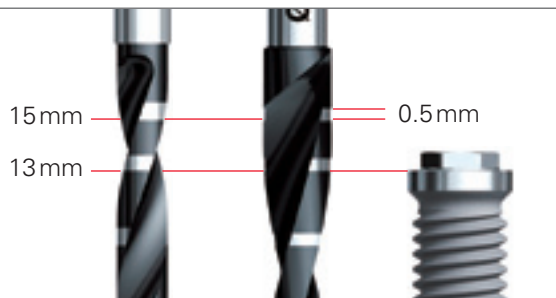

Mk235 JP 1305 © Nobel Biocare Services AG, 2013. All rights reserved.

ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および本書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。