

ノーベル ロケーター・アバットメント インターナル・コニカル・コネクション用

ノーベルアクティブ・インプラントに使用可能な「ノーベル ロケーター・アバットメント」
インターナル・コニカル・コネクション用が発売となります。

ロケーター・アバットメントは、操作性、耐久性に優れ、高さのバリエーションが豊富なため
歯肉の厚さに合わせたアバットメントの選択が可能です。
また、インプラント間の角度は40°までの場合に使用できます。
義歯に装着するリテンションディスクは維持力に合わせて5種類(裏面参照)ございます。



エクスターナル・ヘキサゴン・コネクション(ブローネマルク)



New!
インターナル・コニカル・コネクション



インターナル・トライ・チャンネル・コネクション(ノーベルリプレイス)

製品名	NP	RP	WP	NP	RP	NP	RP	WP	6.0
ノーベル ロケーター アバットメント 0mm	-	-	-	-	-	REF 08756	REF 08761	-	-
ノーベル ロケーター アバットメント 0.73mm	REF 08105	REF 08681	-	-	-	-	-	-	-
ノーベル ロケーター アバットメント 1.0mm	-	-	-	REF 02069	REF 02075	REF 08757	REF 08762	REF 08766	-
ノーベル ロケーター アバットメント 1.1mm	-	-	REF 08825	-	-	-	-	-	-
ノーベル ロケーター アバットメント 2.0mm	REF 08106	REF 08682	REF 08826	REF 02070	REF 02076	REF 08758	REF 08763	REF 08767	-
ノーベル ロケーター アバットメント 3.0mm	REF 08107	REF 08683	REF 08827	REF 02071	REF 02077	REF 08759	REF 08764	REF 08768	-
ノーベル ロケーター アバットメント 4.0mm	REF 08108	REF 08684	REF 08828	REF 02072	REF 02078	REF 08760	REF 08765	REF 08769	-
ノーベル ロケーター アバットメント 5.0mm	REF 08109	REF 08685	REF 08829	REF 02073	REF 02079	REF 08734	REF 08753	REF 08770	-
ノーベル ロケーター アバットメント 6.0mm	-	REF 08696	-	REF 02074	REF 02080	REF 08735	REF 08754	-	-


備考: ノーベル ロケーター・アバットメントは未滅菌品です。

ノーベル ロケーター アバットメント

(医療機器承認番号: 22300BZX00408000、22400BZX00340000)


【 アバットメント高さの選択について 】

エクスターナル・ヘキサゴン・コネクションおよび
インターナル・トライ・チャンネル・コネクション用の場合

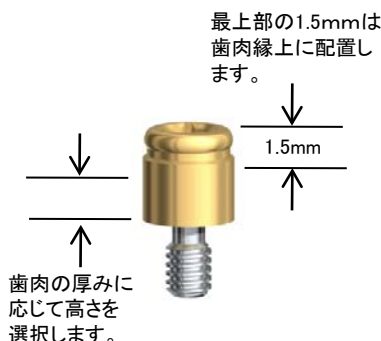

(上図はエクスターナル・コネクションです。)

インターナル・コニカル・コネクション用の場合

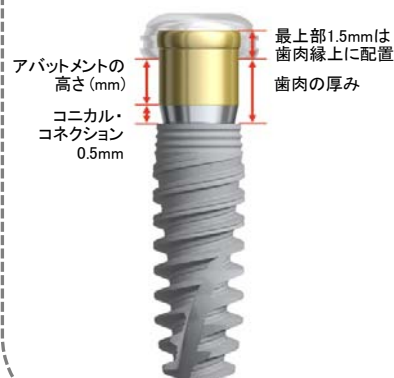

インターナル・コニカル・コネクションは、連結部が
独自のデザインとなっており、ノーベル ロケーター
アバットメントの高さを選擇する際には、歯肉の厚
みから 0.5mm 差し引いた高さを選擇する必要があ
ります。

例:
歯肉の厚み 4.5mm
コニカル部分 -0.5mm
選擇する高さ 4.0mm

Locator tools and component

インストゥルメント

製品番号	製品名
REF08393	ロケーター コアツール
REF08397	ロケーター コアツール メール リム-ハルツール
REF08390	ロケーター コアツール アバットメントドライバー
REF08913	ロケーター ラッチタイプ トルクレンチドライバー(23mm)
REF08914	ロケーター ラッチタイプ トルクレンチドライバー(29mm)
REF08517	ロケーター パラレルポスト(4個入)*
REF09530	ロケーター アンクルガイド

(医療機器届出番号: 13B1X00052000044)

アナログ(レプリカ)

製品番号	製品名
REF08516	ロケーター フィメールアナログ ^φ 5mm (4個入)
REF08516-20	ロケーター フィメールアナログ ^φ 5mm (20個入)
REF08530	ロケーター フィメールアナログ ^φ 4mm (4個入)
REF08530-20	ロケーター フィメールアナログ ^φ 4mm (20個入)

(医療機器届出番号: 13B1X00052000044)

備考: インプラントのプラットフォームに準じて選択してください。

「NP/RP = ϕ 4mm」 「WP = ϕ 5mm」

なお、インターナル・コニカル・コネクション用には、 ϕ 4mmをご使用ください。

ロケーター・メール

製品番号	製品名
REF08515	プロセッシングディスク(ブラック)(4個入)*
REF08515-20	プロセッシングディスク(ブラック)(20個入)*
REF08524	ロケーター リテンションディスク(クリアー)(4個入)
REF08524-20	ロケーター リテンションディスク(クリアー)(20個入)
REF08527	ロケーター リテンションディスク(ピンク)(4個入)
REF08527-20	ロケーター リテンションディスク(ピンク)(20個入)
REF08529	ロケーター リテンションディスク(ブルー)(4個入)
REF08529-20	ロケーター リテンションディスク(ブルー)(20個入)
REF08547	ロケーター リテンションディスク(グリーン)(4個入)
REF08547-20	ロケーター リテンションディスク(グリーン)(20個入)
REF08548	ロケーター リテンションディスク(レッド)(4個入)
REF08548-20	ロケーター リテンションディスク(レッド)(20個入)

(医療機器認証番号: 223AGBZX00003000)

プロセッシング

製品番号	製品名
REF08505	印象用コーピング ロケーター(4個入)*
REF08505-20	印象用コーピング ロケーター(20個入)*
REF08514	ロケーター ブロックアウトスパー(20個入)
REF08519-10	プロセッシングキャップ(10個入)*
REF08519-2	プロセッシングキャップ(2個入)*

(医療機器認証番号: 223AGBZX00003000、医療機器届出番号: 13B1X00052000044)

上記*印の付いた製品は、オートクレーブ滅菌不可です。

製品についてのお問い合わせは、営業またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

お問い合わせ先: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F TEL: 03-6717-6191(代表)

ロケーターコアツール

3ピース 構造



備考: リム-ハルツールおよびアバットメントドライバーは単品での販売が可能です。



ラッチタイプ トルクレンチ ドライバー



アンクルガイド



パラレルポスト



フィメール アナログ

リテンションディスクは維持力によって、色が異なります。



維持力
(キログラム)

クリアー・・・2.3 kg
ピンク・・・1.4 kg
ブルー・・・0.7 kg
グリーン・・・1.8 kg
レッド・・・0.5 kg

インプラント
埋入角度

0 ~ 10°
10 ~ 20°

インプラント埋入角度が0~10° (インプラント相互間の角度が0~20°) の場合は、クリアー、ピンク、ブルーを、インプラント埋入角度が10~20° (インプラント相互間の角度が20~40°) の場合は、グリーン、レッドを使用してください。

印象用コーピング プロセッシング



印象用コーピング
ロケーター

キャップ (下記5点を含みます。)



ロケーター キャップの単品販売はございません。